

健康で快適な生活を提案する

マルタカ

カラダの内から、元気になる。



頭痛に


肩こりに

不眠症に

慢性便秘に

movas

モーヴァス

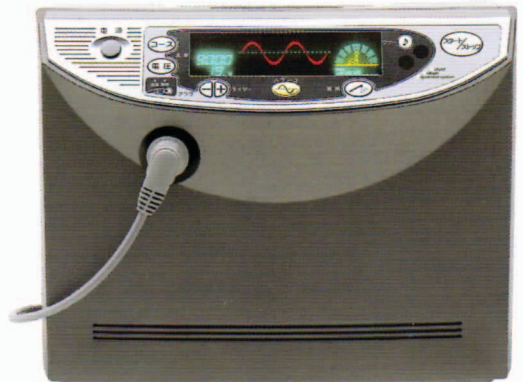

家庭用電位治療器 販売名:モーヴァス



# 9000Vのヘルシーライフ、はじまる。

—高品位モデル— 健康のリズムを奏でる『モーヴァス』誕生。

最大波高値 14,000Vp、最大実効値 9,000Vrms をしっかり治療に生かす、それが新開発モーヴァスのOVAシステムです。

【お問合せは】 株式会社 SOSネットワーク



フリーダイヤル

0120-43-5215

〈電位出力フィードバック制御〉

いつでも、よりよい電位出力を保持

電位出力は使用する場所や姿勢などの負荷条件によって下がります。そこでマルタカ独自の出力フィードバック制御が、電位出力の低下を補正し、効果的な治療を実現します。

**M**arutaka  
**O**utput  
**V**oltage  
**A**djustment  
**S**ystem




※絶縁シートを2枚並べて敷き、その上に布団を敷いて、通電シートをご使用ください。



ゆったり、じっくり、長時間治療

じっくり治療できる800Vの低電圧長時間コースをご用意。1～8時間の設定ができるタイマーで、横になりながら治療が行えます。

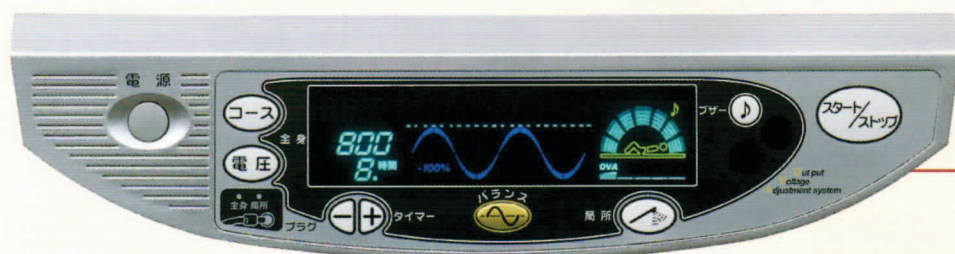

大型パネル&便利機能

## ■大型蛍光表示

明るいカラー表示で、作動状況がとても見やすい大型パネル。操作もワンタッチで簡単です。

## ■メモリー機能

前回の治療内容(電圧、コース、出力バランス、タイマー設定)をあなたに代わって記憶します。

## ■明るさセンサー

周囲の明るさを感知して、表示輝度を自動的に調整。お部屋を暗くしてお使いいただく場合も、パネルの眩しさが気になりません。






〈バランス切替機能〉

## 体調に合わせて3段階切替え

その日の体調に合わせて、出力バランスを3段階(50/-75/-100%)から選べます。一人ひとりに適した治療が行えるマルタカ新開発の機能です。

### ●3つのバランス

\*波高値の正負比率

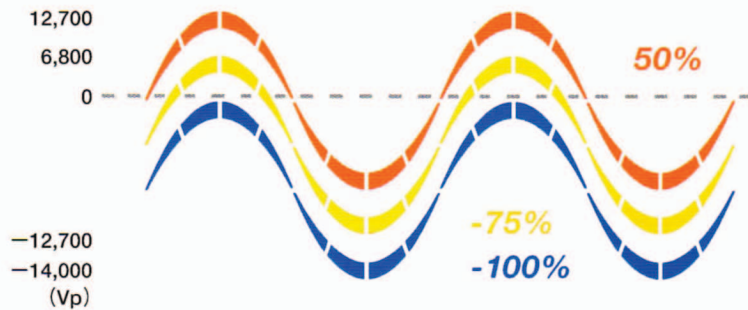


### 30パターンの多彩な選択

通電シートを使った全身治療では、バランス切替×電圧(9000/6000/3000/800V)、バランス切替×自動コース、それぞれの組み合わせによって、24パターンの治療が行えます。電子ペンによる局所治療は、バランス切替×電圧(1500/800V)の組み合わせで6つのパターンが行えます。


### 慣れを防ぐ、4つの自動コース

電圧の自動変化が異なる、4タイプのコースをお好みで選択できます。


#### Aコース

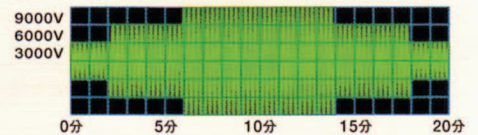


#### Bコース

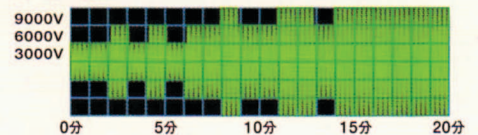

#### Cコース

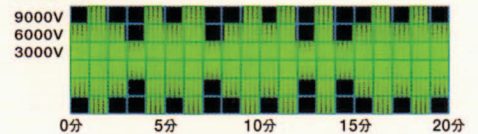

#### Dコース

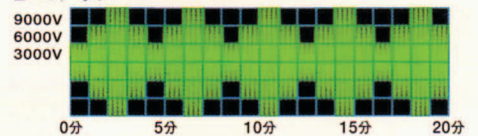

やさしい使用感の「-100%」。マイナス電圧なら、電子ペンによる通電の刺激感に差が出ます。



### 電子ペンで局所治療

首筋や肩などの疲れやすい局所の治療には、電圧を集中させる電子ペンが効果的です。ペン先を使ったポイント治療も、ローラーでのムラのない治療も可能。電圧は800Vと1500Vの2段階切替ができます。



#### ■ジャック自動認識


プラグの差し込み時に通電シートと電子ペンを自動認識して、お知らせします。

#### ■アラーム機能

誤操作や機械的な異常、また自動コース終了時など、作動状況をやさしいアラーム音でお知らせします。

#### ■安全装置

タイマー機能、漏電防止機能、過電流保護機能など、機械の安全性を確保する機能が充実しています。

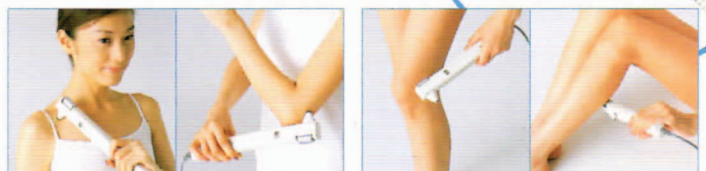

●ペン先で


●ローラーで



## 電位治療とは？

電位治療器は、1秒間に50回(または60回)のプラスとマイナスが入れかわる数千ボルトの交流の高電位を作り出します。この高電圧を絶縁状態におかれた人体にかけることにより、頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘に効果があります。

### セット内容

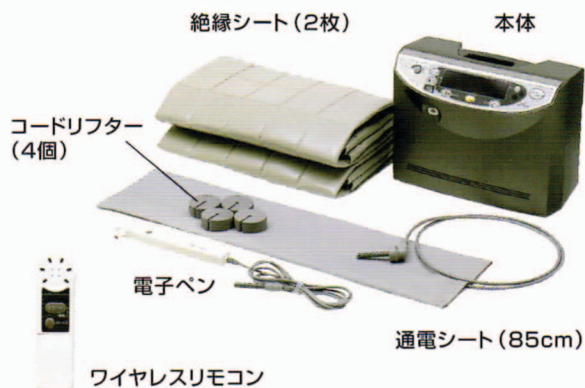

一年間責任保証

標準小売価格 **580,000** 円  
(税込 **609,000** 円)

### オプション付属品



リズムで生まれる、  
健康ライフ。



絶縁仕様のリクライニングチェアで、  
リビングでも快適便利にモーヴァスタイム。

〈電位治療用リクライニングチェア〉

### 別売品

コンパクトな座布団サイズの  
温熱マット。  
強・弱切替え付き。



温熱マット 35,000円  
(税込 36,750円)

### 主な仕様

販売名	モーヴァス	定格周波数	50-60Hz
医療機器製造販売承認番号	21700BZZ00060A01	定格電圧	AC100V
医療機器の区分	管理医療機器	消費電力	15W
類別	機械器具(78)家庭用電気治療器		
一般的名称	家庭用電位治療器(JMDNコード70987000)		
本体サイズ	寸法:高さ315×幅400×奥行225mm 重量:約10kg		
出力	通電シート	自動コース:A/B/C/Dコース バランス:50/-75/-100% 電圧出力:9000/6000/3000/800V	
	電子ペン	バランス:50/-75/-100% 電圧出力:1500/800V	
タイマー	全身高電圧:10~60分 全身低電圧:1~8時間 局所:5~15分		
安全装置	タイマー、漏電停止回路、過電流保護回路		

※仕様、及びデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社マルタカテクノは、家庭用電位治療器の設計・開発、製造、及びアフターサービスに対する医療機器における品質マネジメントシステム規格ISO13485:2003年認証を取得しています。



電気用品安全法技術基準適合認定済



EPR-03Mは、JQA(日本品質保証機構)総合製品安全認証制度に基づく電気製品の安全性に関する認証を取得しています。



### 安全に関するご注意

ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次のような医用電気機器との併用は、誤作動を招く影響を与える恐れがあるので使用しないでください。ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器/人工心肺等の生命維持用医用電子機器/心電計などの装着型の医用電気機器
- 心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しないでください。
- お子様やご自分で意志表示のできない方には、使用しないでください。
- 次のような場合・もしくは身体に異常のある人・または体調のすぐれない人は、本器を使用するに際して医師に相談された上、その指示に従ってください。悪性腫瘍のある人/心臓に障害のある人/妊娠初期の不安定期又は出産直後の人/体温38℃以上(有熱期)の人/安静を必要とする人/骨折、捻挫、肉離れなど急性とう(疼)痛性疾患の人/糖尿病などによる高度な抹消循環障害による知覚障害のある人/高血圧の人/不整脈のある人/睡眠時無呼吸症の人/喘息の人
- 通電中に気分が悪くなったり、身体に異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。
- 導子(通電シート・電子ペン)が濡れている場合には使用しないでください。
- 本品に万一故障などが発生した場合は、直ちに使用を中止し、お買い求め先までご連絡ください。

### ●操作方法や修理などのご相談は

〈製造販売〉

株式会社 **マルタカテクノ**

静岡県藤枝市八幡字広通550-1

**0120-484-100**

Free Dial 平日9時~18時受付(祝祭日、当社の休日を除く)

### ●その他のお問い合わせは

株式会社 **マルタカ**

東京都中央区銀座6-16-12丸高ビル

**0120-224-027**

Free Dial 平日9時~17時受付(祝祭日、当社の休日を除く)

http://www.marutaka.co.jp

### ●お取扱店

販売: 株式会社 SOSネットワーク

お問合せは:



フリーダイヤル

**0120-43-5215**

【土日祝も営業】

ショールーム: 東京店・千葉店・名古屋店・大阪店